

こんな時は	
電源が入らない	電池が消耗したか、古い電池と交換してしまっか、電池の⊕⊖の向きを間違えてセットしてしまった可能性があります。「電池と交換方法」をご参照ください。
表示部の右上に「Lo」が表示される	電池が消耗しています。正確な測定ができません。電池を交換してください。「電池と交換方法」をご参照ください。
測定温度が異常に低い	測温部と測定部位が十分に密着していなかった可能性があります。「正確な測定のために」をご参照の上、再度測定してください。
測定温度が異常に高い	測温部が何らかの理由で熱くなっていた可能性があります。測温部を冷やしてから再度測定してください。その際、電源を入れて測定可能な状態になる時に「Lo」が表示されることを確認してから測定を開始してください。
測定温度が一定しない	飲食・運動・入浴直後の測定か、測定部位が一定していないか、測定方法に問題がある可能性があります。「正確な測定のために」をご参照ください。

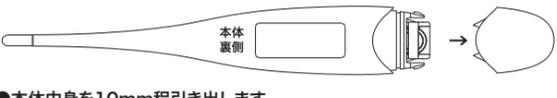
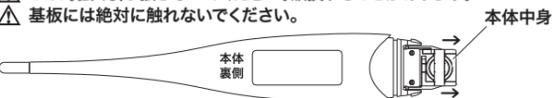
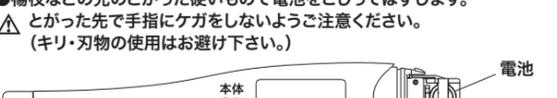
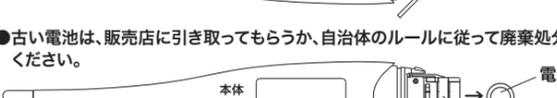
電池と交換方法

■本品にはあらかじめ電池が内蔵されています。
 ■ご購入時に内蔵されている電池は動作確認のため、寿命が短い場合がございます。
 ■新品の電池の寿命は、一日10分使用した場合、約2年です。
 ■電池の寿命が近づき電圧が低下すると、測定開始時に表示部右上に「Lo」マークが点滅表示され、測定できなくなります。
 ■寿命と判断された電池はすみやかに新しい電池と交換してください。そのまま放置することはお避けください。液漏れにより故障の原因になります。
 ■使用電池はアルカリボタン電池LR41×1個です。
 ■古い電池は、販売店に引き取ってもらうか、自治体のルールに従って廃棄処分してください。

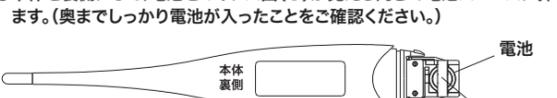
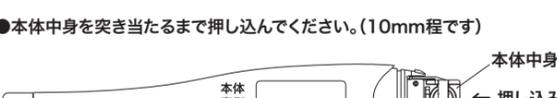
電池交換の方法

1. 電池のはずし方

- 本体を裏側にします。

- 電池ケースフタを引き抜いてはずします。

- 本体中身を10mm程引き出します。
 △この時強く引っ張らないでください。破損することがあります。
 △基板には絶対に触れないでください。

- 楊枝などの先のとがった硬いもので電池をこじってはずします。
 △とがった先で手指にケガをしないようご注意ください。
 (キリ・刃物の使用はお避け下さい。)

- 古い電池は、販売店に引き取ってもらうか、自治体のルールに従って廃棄処分してください。


2. 電池の入れ方

- 本体を裏側にして、電池をマイナス面(⊖)が見える向きで電池スペースに押し込みます。(奥までしっかり電池が入ったことをご確認ください。)

- 本体中身を突き当たるまで押し込んでください。(10mm程です)

- 電池ケースフタを差し込みます。

- 完了。


お手入れと保管

- ご使用後は、ガーゼ等に消毒用アルコールまたはぬるま湯を浸み込ませ、かたく絞ったもので、測温部を軽く拭いてください。
 (電池ケースフタ部と本体の間に浸み込ませないようご注意ください。)
- シンナーやベンジンは使用しないでください。故障の原因になります。
- 保管する際は、本体を乾燥した状態にして、高温の場所、直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、ホコリが多い場所、腐食性ガスの発生する場所を避けてください。
- 長期間保管する場合は、電池を本体から抜いてください。

仕様

一般的名称	電子体温計
販売名	オーム電子体温計MT418-Y
型番/品番	MT418-YN/08-1620
医療機器認証番号	306AKBZX00046000
温度測定範囲	32.0℃～42.9℃ 32.0℃未満で「Lo」表示、42.9℃を超えて「Hi」表示
測定精度	±0.1℃ (室温18℃～28℃にて恒温水槽で実測測定した場合)
温度表示	デジタル液晶表示3桁+℃表示、0.1℃単位
測定方式	予測・実測式
測定値メモリー	最後の測定値を記憶保存しています
測温部	サーミスタ
電撃保護	内部電源機器B形
使用電池	アルカリボタン電池LR41×1個
使用環境条件	10℃～40℃/30～85%RH
保管環境条件	-10℃～60℃/30～95%RH
外形寸法	(約)長さ130.5×幅19.7×厚さ10.88mm
本体質量	約8.6g (電池含む)
電池使用寿命	約2年 (一日10分使用の場合)

※商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更することがあります。

販売元

株式会社 西松屋チェーン

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄 266-1

製造販売元・お客様相談窓口

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

https://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
 電話受付 平日9:00～17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証書 持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 (イ) 使用上の誤り、または、自己修理・分解・調整・改造等による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 (ホ) 本書のご提示がない場合
 (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご購入、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	オーム電子体温計 MT418-Y	★お買い上げ日	年	月	日	
型番	MT418-YN	品番	08-1620	保証期間: 本体1年間 (お買い上げの日から)		
お客様	ふりがな	★お名前				様
		★ご住所 (〒 -)				
		電話 ()				
販売店	★住所 店名 電話					(印)

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
 電話受付 048-992-3970 平日9:00～17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
 ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
 電話受付 平日9:00～17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

Y240801